
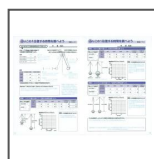


1-110-0208

振り子実験器

1MA-SN（スタンドなし）

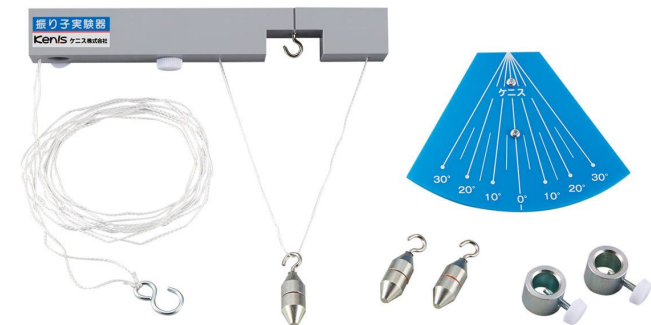

標準価格(税抜)

¥17,000

(税込：¥18,700)

- 振り子の糸の長さはスライド式糸止めリングに引っ掛けるだけで10cm～1.2mまで自由に設定できます。
- おもりを支える糸はV字掛けを採用しており、前後のブレを軽減します。また、V字掛けの糸を束ねることもでき、教科書の実験と似た1本掛け振り子の実験もできます。
- おもりを吊るす個数を変えることでおもりの重さによる振り子の影響を比較することができます。
- おもりは重心がわかる中心ライン入で、振り子の長さの測定が簡単です。また、おもりを複数個吊り下げた場合も、重心位置がそろった形状です。
- 角度板は青色で、振り子の糸（白色）がはっきり読み取れます。さらに教科書に合わせた角度を採用しています。
- 授業に役立つワークシートが付属しています。
- 実験器に貼付したQRコードを読み取ると、実験の操作手順などを動画で確認できます。
- お手持ちの鉄製スタンド（支柱12φ以下）に取り付けて使用します。

振り子	長さ10cm～1.2m 対応支柱（12φ以下）
角度板	30度～0～30度
付属	おもり：金属製20g×3個 ワークシート

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.